

TOMATO ORIGINAL CATALOG

より快適な暮らしのために
私たちは考えます。



利用される方のニーズや住宅環境に合わせ、ハイレベルで応えるトマトの福祉機器。
自社工場で製造しておりますので、オリジナル商品だけでなく
お客様個別の特注製品にも対応いたします。
様々な福祉機器の販売から製造まで、より快適な空間を提供いたします。

障害者・高齢者介護用品、リハビリ用品、福祉機器、レンタル、福祉住宅改修

すこやかな暮らし・安心をお届けします
福祉用具販売貸与認定事業所
No.2273200127
みやび
シルバーショップ雅

お問い合わせは

フリーダイヤル 0120-0-41605



静岡県静岡市清水区渋川 1-6-20

TEL.054-349-2180

Mail: tomato@tomato-miyabi.co.jp

URL: https://www.tomato-miyabi.co.jp



トマト オリジナルカタログ

Good Life Communication

VOL.33

	入浴用分離ストレッチャー		介護リフト付シェルター
	電動昇降式 トイレベッド		浴室洗い台
	介護浴槽		自立支援型電動昇降式 トイレベッド
	ユニットたたみ		安全てすり



より快適な暮らしのために 私たちは考えます。

様々な介護の問題解決のために株式会社トマトでは
自社開発製品を多くの施設様や在宅様で導入・利用していただいております。
寝浴・座浴介護リフト入浴システムや、電動昇降式トイレベッドをはじめ、
ご利用者様の安全と、介助者様の介護負担を軽減させる事を目的とし、
福祉機器の開発・製造を行っております。

機械浴槽の
約1/3の費用で
導入できます

全国に販売実績
安心と信頼の
入浴システム

介助者の
作業負担を
軽減



介護リフト入浴システム

入浴用分離ストレッチャー
寝浴槽・個浴槽
マイクロバブル内蔵浴槽



トマト オリジナルカタログ

Good Life Communication

VOL.33

寝浴・座浴 介護リフト入浴システム

- 入浴用分離ストレッチャー「ゆ〜らく(湯楽)」 3
- 寝浴槽 5
- 個浴槽 6
- 浴室洗身台「ゆかい(湯介)・ゆあん(湯安)」 6
- マイクロバブル内蔵浴槽 7
- 電動昇降着替え台「きらく(着楽)」 7
- トータルコーディネート 8

トイレベッドシリーズ

- 電動昇降式トイレベッド「さつき」 9
- 自立型電動昇降式トイレベッド「わかば」 10
- リハビリ訓練電動昇降式トイレベッド「のぞみ」 11
- 導入例 11
- 高さ固定式トイレベッド「あおい」 12
- 関連商品 12

トマト製品ラインナップ

- 小児用バスチェア「湯っくり」 13
- 障害児(者)移乗シート「らくい」 14
- 障害児(者)向け入浴用洗い台「くるみ」 14
- 入浴用品 介護浴槽「湯った〜りII」 15
- ユニットたたみ「さわやか」 16
- 木製ミニスロープ 16
- 介護リフト付シェルター「安寝・楽安・快保」 17
- 入浴踏み台 17
- 跳ね上げてすり「ウイング」 17


寝浴・座浴介護リフト入浴システム



寝浴=機械浴槽に変わる新たなる入浴システム

■ 入浴用分離ストレッチャー「ゆ〜らく(湯楽)」

TMT-1001

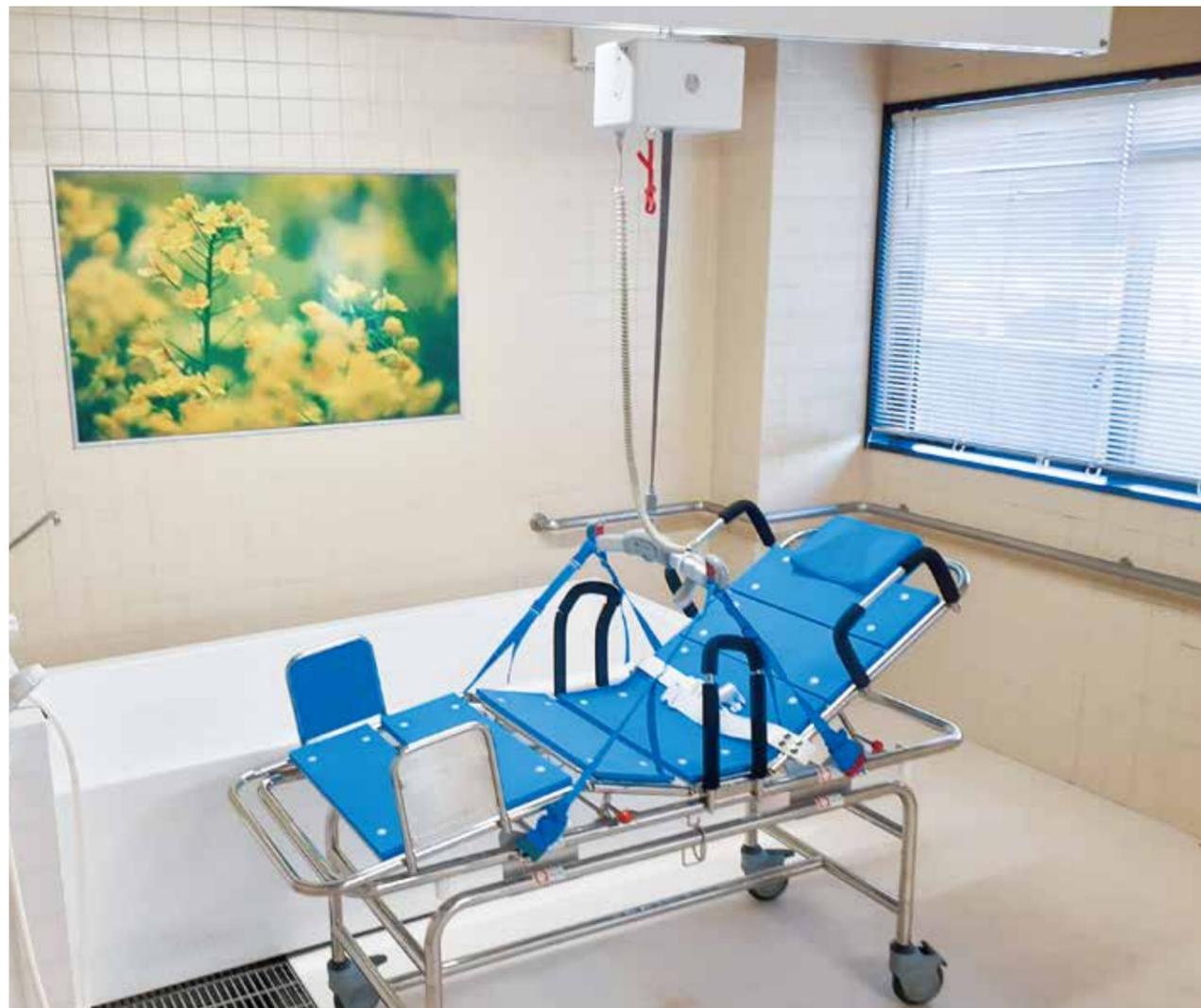

入浴ご利用者の洗体



介護リフトで上昇させ吊り上げ部と架台部を分離

介護リフトで下降させ浴槽入浴

- ・介護リフトを使用し吊り上げ部と架台部が分離して寝たままの姿勢での入浴が実現できる入浴用分離ストレッチャーです。
- ・導入費用が高い機械浴槽に比べ安価で同等のサービスを提供できます。
- ・介護リフトを使用する為、持ち上げ介助がなく老若男女問わず同じ入浴介助を行う事ができます。

介護現場では利用者の多様化が進む中、省スペースで低コストな製品で介助の質を落とさない製品が求められております。入浴用分離ストレッチャーゆ〜らく(湯楽)は多くの方から実際の介護の現場での様々な問題点を聞き、その声を形にした事で利用者と介助者の双方が安全で快適な入浴を実現する事ができました。

■ 納入例



入浴用分離ストレッチャーゆ〜らく(施設例)



入浴用分離ストレッチャーゆ〜らく(在宅例)




寝位入浴(分離式ストレッチャーでの入浴)



座位入浴(分離式シャワーチェアでの入浴)

■ 寸法図

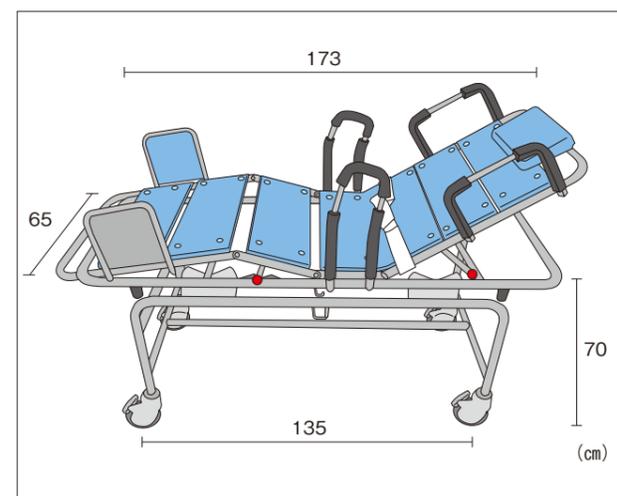

■ 仕様

寸法	吊り上げ部	幅65×長さ173×高さ11(cm)
	架台部	幅62.5×長さ135×高さ67(cm)
	全体	幅65×長さ173×高さ70(cm)
	リクライニング角度	吊り上げ部フレームに対して0°・15°・30°
重量	脚上げ角度	吊り上げ部フレームに対して0°・16°
	吊り上げ部	約29kg
	架台部	約14kg
耐荷重	全体	約43kg
	150kg	
材質	フレーム	ステンレス SUS-304
	本体/パーツ	ステンレス、ポリエチレンフォーム、ゴム、プラスチック
	ベルト	ポリエステル、ステンレス
	キャスター	ステンレス、プラスチック、ゴム(直径12.5cm)、ストッパー付

■ 背角度3段階、脚角度2段階の調整可能



脚角度0度・背角度0度



脚角度16度・背角度0度



脚角度16度・背角度15度



脚角度16度・背角度30度

寝た姿勢のまま全身が湯船に浸かる事を可能にした浴槽

寝浴槽

障害者や、介護度が高い高齢者が安心して安全に入浴するための分離式ストレッチャー専用浴槽です。
入浴介助者の身体的負担が軽減し腰痛予防対策となり介助者の安全も確保できます。
移動式浴槽はレイアウトの変更や、簡単に移動して浴槽の下を清掃できるので、浴室内を清潔に保つ事ができます。



FRP浴槽

幅91cm×長さ206cm×高さ62cm



FRP浴槽(移動式)

幅93cm×長さ208cm×高さ70cm



FRP浴槽(仕切板仕様)

幅89cm×長さ195cm×高さ58cm



ステンレス浴槽

幅89cm×長さ204cm×高さ70cm



ひのき浴槽(移動式)

幅86cm×長さ201cm×高さ70cm
仕切板仕様有り




ひのき浴槽(仕切板仕様)

幅86cm×長さ201cm×高さ62cm
移動式仕様有り

座った姿勢での入浴に最適なオリジナル浴槽

個浴槽

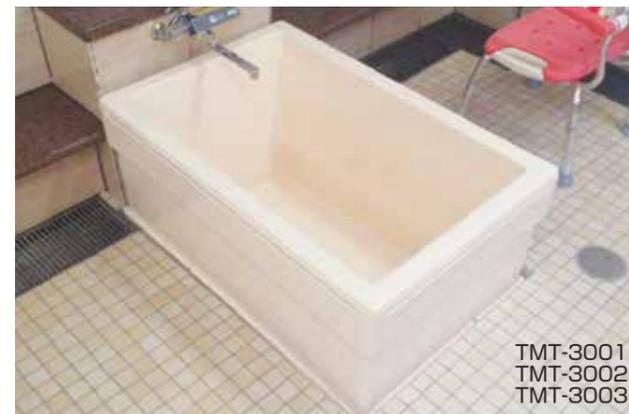

介護用FRP個浴槽

幅 66cm×長さ101cm×高さ64cm(3001)
幅 71cm×長さ103cm×高さ64cm(3002)
幅111cm×長さ151cm×高さ64cm(3003)



介護用FRP個浴槽(移動式)

幅 68cm×長さ103cm×高さ75cm(3001-M)
幅 73cm×長さ133cm×高さ75cm(3002-M)
幅113cm×長さ153cm×高さ75cm(3003-M)



施設用FRP個浴槽

幅68cm×長さ110cm×高さ60cm(3004)
幅68cm×長さ110cm×高さ47cm(3005)



施設用FRP個浴槽(移動式)

幅70cm×長さ112cm×高さ71cm(3004-M)
幅70cm×長さ112cm×高さ66cm(3005-M)

浴室洗身台「ゆかい(湯介)・ゆあん(湯安)」



(フラットタイプ)

TMT-5101-M

幅75cm×長さ170cm×高さ70cm
オプション(安全てすり付)
移動に便利なキャスター付き



(背上げタイプ)

TMT-5301-M

背角度は0度、15度、30度の3種類
脚の角度が上がるため身体がスレ落ちるのを防ぎます。
転落防止のサイドレールの取り付け可能
移動に便利なキャスター付き

圧倒的な洗浄力と消臭効果を実現できるマイクロバブル

■ マイクロバブル内蔵浴槽 TMT-2022-MJ



マイクロバブルを内蔵させた浴槽で
介助者の洗身作業を軽減できます!

● マイクロバブルの特徴(入浴者のメリット)

- もう洗身作業はいらない
擦り洗いが不要で、小さい泡が全身くまなく洗浄し、洗い残しを防ぎます。
- 超微細な泡で皮脂・汚れ・匂いを無くせる
浴槽に浸かるだけで全身キレイになります。
- 皮膚に疾患がある方でも入浴できる!
どなたでも、リラックスした入浴を実現できます。
- 拘縮などにより体位変換できなくても、分離ストレッチャーを使って入浴できる
ストレッチャーに乗せるだけなので、身体への圧迫無く入浴することができます。
- 入浴介助者の作業はさらに軽減できる
洗身介助の負担軽減により、入浴作業の効率化、介助者の負担軽減ができます。



■ 電動昇降着替え台「きらく(着楽)」 TMT-4001



(フットスイッチ/昇降ペダル・高さを記憶できるメモリーペダル)
幅60~70cm×長さ180cm×高さ45~83cm

(フットスイッチ/昇降ペダル・高さを記憶できるメモリーペダル)(キャスター付き)
幅60~70cm×長さ180cm×高さ45~83cm


寝浴・座浴機械浴槽にかわる、低投資で行える入浴システム

入浴システムトータルコーディネート



After (介護リフト、寝浴槽、個浴槽入替)

浴室と脱衣室に介護リフトがあれば、全ての移乗が持ち上げ介助なくできます。脱衣室では、介護リフトを使用して車いすから着替え台に移乗し、衣類を脱がせてご利用者の容態に合わせて、着替え台から入浴用分離ストレッチャーや分離式シャワチェアに移乗します。
浴室内では、ストレッチャーやシャワチェアの上で洗身作業を行います。介護リフトを利用して、持ち上げ介助なくそのまま分離して上昇させ、寝浴槽や個浴槽に浸かれます。マイクロバブル内蔵浴槽があれば、洗身作業の必要も無くなります。一連の入浴介助での介助者の作業負担の軽減化や効率化はかれます。ご利用者も安心して安全に入浴できる事で、リラックスした入浴が実現でき、湯船に浸かる事での満足度向上、身体的負担軽減につながります。

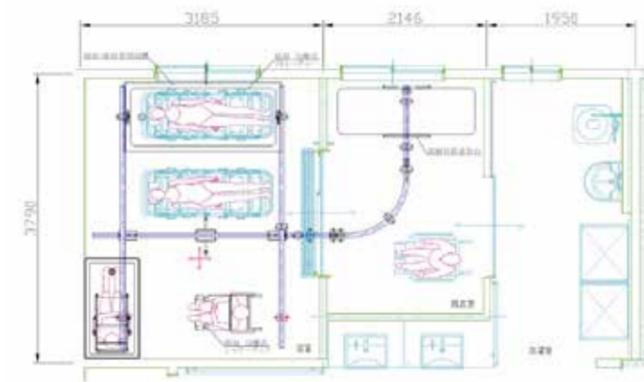

入浴システムのメリット

移乗方法	介護リフトを使用して安全に移乗が行える。
介助者の作業性	無理な力を必要としない為、リラックスした介助が行える。
介助者の作業効率	1~2人介助が可能・持ち上げ介助が無い。
介助者の安全	共倒れなど同時転倒するおそれが無い。
介助者の負担	介護リフトを使用する為、身体的負担が無い。 介助者の入浴対応時間の短縮ができる。 介助者の少人数対応が可能。
入浴者の安全	移乗時に転倒、転落のおそれが無い。
入浴者の負担	安心感からくるゆとりと安定がある。
入浴介助全般	脱衣から入浴まで入浴者、介助者共に安全は担保される。
浴室スペース	最小で2.5m×3.5mのコンパクト設計が可能。

寝た姿勢のままの排泄を可能にするトイレベッド

■ 電動昇降式トイレベッド「さつき」 TMT-6001

バリアフリー便器や一般便器と組み合わせて使用できます。電動昇降する事で様々な車いすの高さに合わせられますので、転倒・転落の不安なく安全に移乗できる為、ご利用者の安全を確保できます。ベッド面の高さが83.5cmまで上昇する事で様々な介助者が、腰を曲げない介助ができる事で、トイレ介助の作業負担を軽減できます。



安全サイドレール(オプション)なし、フタ(オプション)無し



安全サイドレール(オプション)なし、フタ(オプション)有り



安全サイドレール(オプション)付、フタ(オプション)無し



安全サイドレール(オプション)付、フタ(オプション)有り



最下段 (43.5cm) 中間 (自由・フリー) 最上段 (83.5cm)


足踏式で電動昇降して、高さが自由に調整できる為、介助者の身長に合わせる事が可能となり、腰痛が軽減できます。また、車いすでも座面と同じ高さにできるので簡単に移乗が可能です。



介護リフトを使ったさつきへの移乗 ※使い方については説明動画がございますので、お問い合わせください。




マットの色は5種類から選びいただけます (特注で色指定可能)

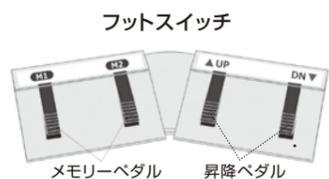

フットスイッチ

メモリーペダル 昇降ペダル

■ 寸法図

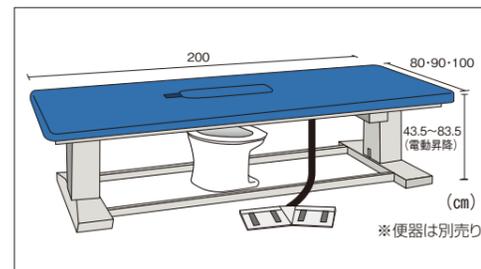

※便器は別売り

・様々な便器と合わせて使用できる事、便器に合わせた開口が可能。(取り外しができるフタ)
 ・フットスイッチは無段階の上昇ペダル、下降ペダルの他に2箇所の高さを記憶できるメモリーペダルがあります。
 ・100Vのコンセントを使用します。

■ 仕様

寸法	幅80・90・100×長さ200×高さ43.5～83.5 (cm)
重量	約100kg
耐荷重	150kg
材質	フレーム部 SS (表面コーティング仕上)
	ベッド部 レザー
	サイドレール部 SS (表面メッキ仕上)

車いすから体勢を崩す事なく自立で移乗でき、長時間の長座位姿勢に耐えられるトイレベッド

■ 自立型電動昇降式トイレベッド「わかば」 TMT-6003

電動昇降式のため様々な車いすの高さに調整できます。車いすの座面とトイレベッドのマット面の高さを合わせる事で、利用者が1人で体制を崩すことなく移乗できます。(車いすをトラスファーテーブルの切りかき部へ差し込む)



背角度0度



背角度78度



背もたれ部の角度変更を手元スイッチにて電動無段階で行うことで長時間の長座位姿勢に対応できます。

フットスイッチ



メモリーペダル 昇降ペダル

高さ変更のフットスイッチは無段階の上昇ペダル・下降ペダルの他に2箇所の高さを記憶できるメモリーペダルがあります。

■ 自立支援シリーズ




背もたれなし、電動昇降タイプ



背もたれなし、高さ固定タイプ

■ 寸法図

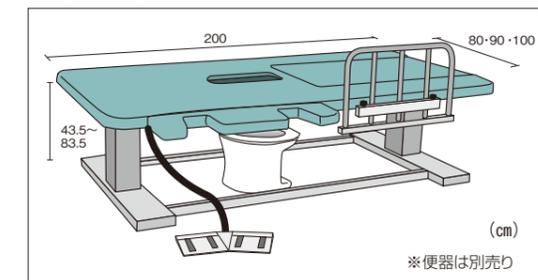

(cm)

※便器は別売り

■ 仕様

寸法	幅80・90・100×長さ200×高さ43.5～83.5 (cm)
背角度	0°～78° (電動無段階)
重量	約100kg
耐荷重	150kg

在宅復帰でのトイレベッドの仕様検証と、日常生活の機能訓練ができるトイレベッド

■ リハビリ訓練電動昇降式トイレベッド「のぞみ」 TMT-6101

在宅復帰でのトイレベッドの仕様検証と日常生活の機能訓練ができるトイレベッド



電動昇降機能



トランスファーテーブル
〈長さ指定可〉



中央フラットマット



寸法／幅80・90・100×長さ200×高さ43.5～83.5 (cm)



スライド式サイドレール
〈上下スライド(二段階)〉

在宅用トイレベッド製作・仕様書作成

身体移動や体位変換・身体保持

機能保持訓練・リハビリ訓練台



ネット式背もたれ



移動・体位変換ボール



排泄用開口部

寝た姿勢のままでの排泄を可能にするトイレベッド

■ 高さ固定式トイレベッド「あおい」 TMT-6002

高さ固定式のトイレベッドです。据置式で電源は必要ありません。幅のサイズは80・90・100cmとお選びいただけます。介護リフトを使用し、移乗します。オプションのサイドレールも取付可能です。



幅80・90・100cm×長さ200cm×高さ65cm



(在宅納入例)

電動昇降式トイレベッド納入例



介護リフト+電動昇降式トイレベッド



床走行式リフト+電動昇降式トイレベッド




電動昇降式トイレベッド+一般便器

トイレベッドシリーズ関連商品



スライド式サイドレール
ボッチを引くと手動で下げることができます

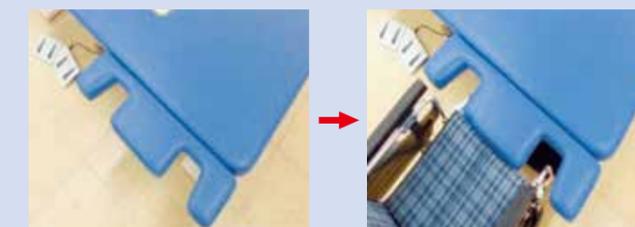

トランスファーテーブル
差込式の移乗用ボードで自立で車いすから移乗できます



中央有孔マット
尿や排便がついても取り外せて洗えるため衛生的にお使いいただけます



飛散防止カバー(固定鉄板タイプ)
トイレベッドと便器の隙間を埋めることにより、飛び散りを防ぎます



中央フラットマット
中央フラットマットを使用すれば着替え台としても活用できます



飛散防止カバー(ビニールタイプ)
トイレベッドの開口部分につけることにより、飛び散りを防ぎます

障害児の快適な洗身と、介護リフトを使って安全に湯船に浸かる事を可能にした小児用バスチェア

■ 小児用バスチェア「湯っくり」 TMT-8800



ご利用される方が安心して快適に入浴できます。座った姿勢での洗身は目線を合わせる介助ができる為、介助者の負担の軽減に繋がります。
 介助リフトを使って吊り上げ可能で、持ち上げ介助なく入浴できます。
 SMLの既製サイズがあり身体の大きさに合わせて、選択できます。
 検証機を使い、一人一人の身体のサイズに合わせた販売機も製作できます。
 本体フレームは3種類のカラーバリエーションから選べます。(実際の色とは異なります)



入浴イメージ




使用イメージ(フラット時)



使用イメージ(背上げ時)



吊り上げイメージ

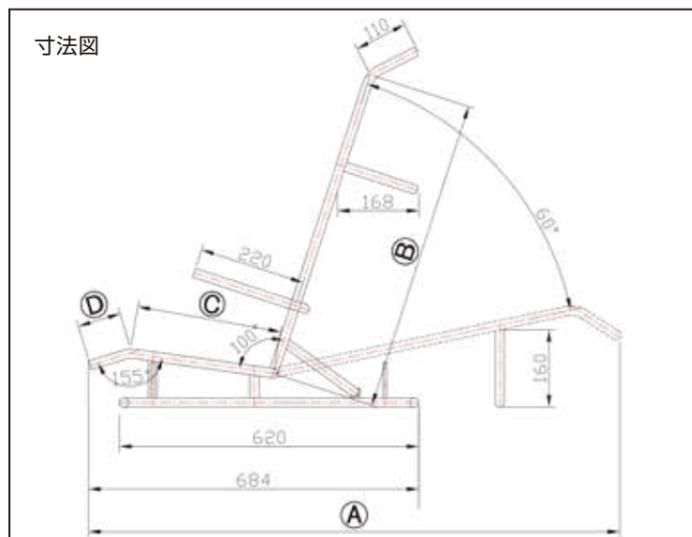

■ 規格サイズ表

規格サイズ 参考適応身長(cm)	S 70~100	M 90~120	L 110~140
① 全長 (cm)	84	99	115
② 背上げ (cm)	45	55	65
③ 座面 (cm)	19	24	30
④ 膝下 (cm)	9	9	9
全幅 (cm)	41	45	49
座面幅 (cm)	32	36	40
重量 (kg)	5.6	5.8	6.0
耐荷重 (kg)	100		


■ 仕様

材質	フレーム部	
	ステンレス SUS-304	
	シート部	
	ポリエステル繊維	

寝た姿勢のまま装着を可能にした介護リフト用吊り具、圧迫なく吊り上げが可能

■ 障害児(者)移乗シート「らくい」 TMT-7001-7002

寝たまま装着でき、介護リフトで使用する簡単で安心な重度用吊り具です。移乗介助の作業負担を軽減します、ご利用者の安全を確保します。

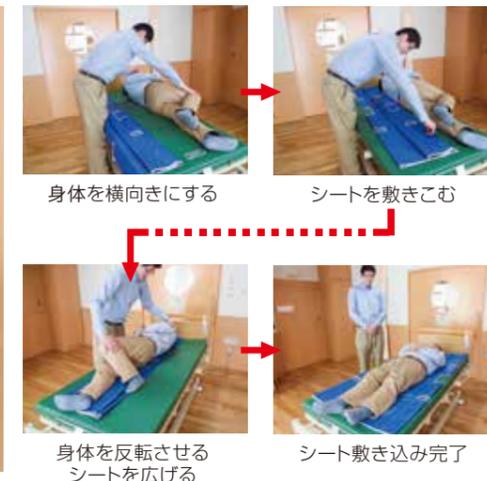

らくい(楽移)の特徴

介護リフトを使って、寝たままの姿勢で着脱できる移乗シートと、専用ストレッチャーです。移乗シートは長さが150cmタイプと180cmタイプがあります。専用バーと横幅固定パイプを使用する事で移乗時、身体に側面からの圧迫をかける事なく使用できます。吊りベルトは長さ調整の目安線がありますので簡単に調整できます。(体格、体重によって調整が必要です。)

介助者が無理な体勢にならずに利用者を洗身できる入浴用洗い台

■ 障害児(者)向け入浴用洗い台「くるみ」 TMT-8001-8002-8003



サイズは100cmから140cmで伸縮が行え、成長の度合いを心配する事なく使用していただけます。ご利用者の身体状況に合わせ、無理な体勢にならずに身体を洗う事が出来ますので、介助者の負担軽減に繋がります。本体シート部分は簡単に取り外しが行え、使用後の陰干しが出来る為、清潔面でも十分に配慮した構造になっています。又、移動シートを使い、介助者2人で担架の様に使用し、入浴シートへ簡単に移動できるので、移乗時の介助者の負担を減らせます。

■ 仕様

寸法	全体	
	幅54×長さ102 (cm)	
材質	架台部	
	幅54×長さ115 (cm)	
	フレーム	
	ステンレスパイプ	
	シート	
	ポリエステル繊維	

移動用シートを使って床から入浴シートへの移動方法




♥ 介護保険購入対象製品 対象商品の中でも自治体によっては対象外とされる場合がございます。詳しくは最寄りの市区町村にお問い合わせ下さい。(さくらのみ)



身体の不自由な方や寝たきりの高齢者が、いつでも自宅で入浴できる在宅介護浴槽

■ 入浴用品 介護浴槽「湯った〜りII」

身体の不自由な方や、寝たきりの高齢者が、いつでも自宅で入浴できるように開発された在宅介護浴槽です。サイズも大きく、身体の大きな方もゆったりと入浴できます。オプションの“安心まくら・安全ネット”を組み合わせる事により、ご自宅でのシャンプーも気軽に安心してご利用になれます。

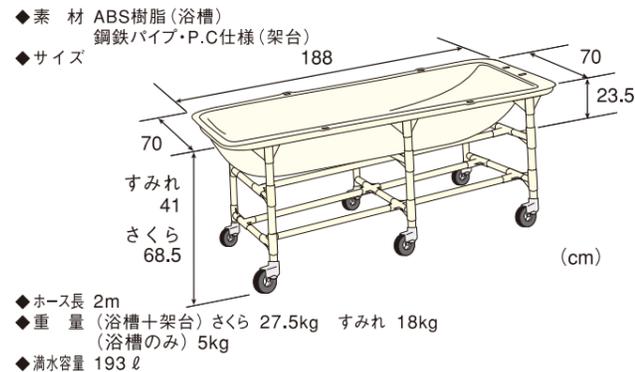

ベッドからの移動が楽なキャスター付き。(さくら)



和室での使い易さを考えたロータイプ。(すみれ)

- 身体に負担がかからない安心設計です。
- 身体の大きな方でも安心して入浴できるゆったりデザインです。
- 軽量設計で、女性でも簡単に浴槽を移動する事ができます。
- どんなお部屋でも少ないお湯でゆったり入浴できます。
- ベッドからの移動が楽なキャスター付。(さくらタイプ)
- 市販のホースを取付けることで、排水ホースの延長も簡単にできます。
- 施設等、環境に合わせて架台の高さが指定できます。(さくらタイプ・特注対応)

充実したオプション

安心枕

柔らかな枕に頭をのせ、ゆったり快適に入浴できます。



素 材 防水ナイロン地・化繊綿

安心ネット

ご自宅で安心してシャンプーできます。安心枕と安心ネットを組み合わせれば、ネット使用の為シャワーで簡単に流せます。身体の小さな方も安心して入浴できます。



素 材 P.Pテープ・ナイロンネット

安心枕セット

ご自宅で安心してシャンプーできます。安心枕と安心ネットを組み合わせれば、ネット使用の為シャワーで簡単に流せます。身体の小さな方も安心して入浴できます。



素 材 安心枕・安心ネット参照

給排水セット

浴室と離れた場所でも手軽に給湯・排水ができます。



構 成 電動ポンプ・ホース10m・ホースバンド

ステンレスキャスター

施設や業務用には錆びないステンレスキャスター(ストッパー付)も指定できます。



素 材 ステンレスSUS-304 車輪直径 10cm

- ◆ 首の負担なく快適に入浴・シャンプーができます。
- ◆ 身体の小さな方でも安心・快適に入浴できます。
- ◆ 浴室と離れた場所での給湯、排水に便利な給排水セット。

♥ 介護保険購入対象製品 対象商品の中でも自治体によっては対象外とされる場合がございます。詳しくは最寄りの市区町村にお問い合わせ下さい。(さくらのみ)

汚れたら水洗いで簡単洗浄、清潔・快適・安全な車いす対応型ユニットたたみ

■ ユニットたたみ「さわやか」

T-TS


汚れたら水洗いで簡単洗浄。清潔・快適・安全な車いす対応型ユニットたたみです。



簡単組立・簡単収納



◆丸洗いたたみの構造

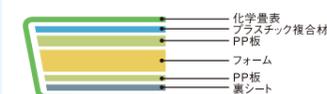


住居内の段差を解消し、車いすの移動やつまづきの防止に役立ちます。


■ 木製ミニスロープ

TM-999-15-20-25-30-35-40

ピラミッドカットの為サイドからのつまづきを防止でき、使い易さと安全性を確保します。

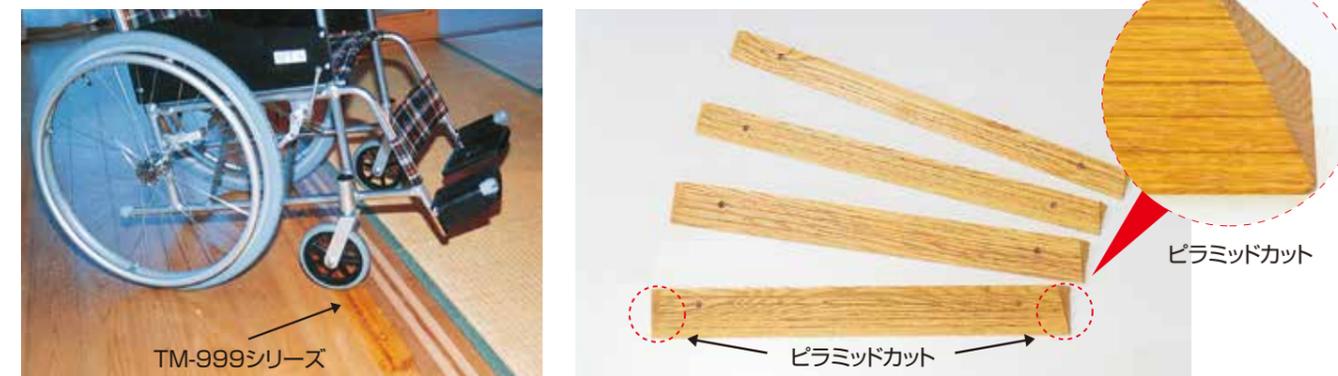

- ◆素 材 ナラ材・滑り止め加工+溝
- ◆サイズ

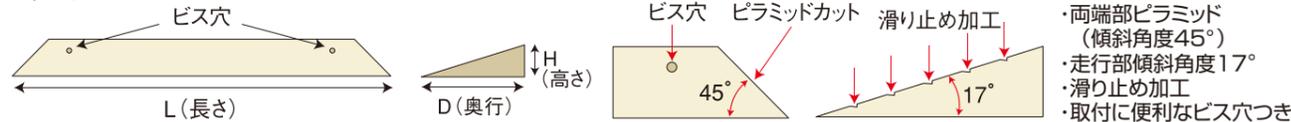

長さ(L)80cm(スタンダードサイズ)
長さ(L)120・140cm(長尺シリーズ)
高さ(H)・奥行(D)サイズ表参照

- ◆付属品 固定用ビス・両面テープ・化粧用シール
- ※天然木の為、写真の色と多少の濃淡が生じます。

品番	TM-999-15	TM-999-20	TM-999-25	TM-999-30	TM-999-35	TM-999-40
高さ(H)	1.5cm	2cm	2.5cm	3cm	3.5cm	4cm
奥行(D)	5.5cm	6cm	8cm	9.5cm	11cm	12.5cm

♥ 介護保険住宅改修対象製品 対象商品の中でも自治体によっては対象外とされる場合がございます。詳しくは最寄りの市区町村にお問い合わせ下さい。

トマト製品ラインナップ

障害者や身体の不自由な高齢者を、もしもの災害から守れる強固なシェルター

■ 介護リフト付シェルター

25年以上に及ぶ福祉機器販売や移動福祉機器取付工事、福祉機器の製造メーカーとしてのノウハウを活かし、身体の不自由な人々を守る介護リフト付シェルターを開発しました。阪神淡路大震災では家屋の下敷きや室内家具の転倒により、建物倒壊から約15分後までに亡くなった方が大半を占めました。もし生存空間さえあれば、助かった命は多かったのではないのでしょうか…。

介護リフト付シェルター「ANNE(安寝)」

TKBS-0815A



介護ベッド・車いすはイメージで、商品には含まれません。



リフトスライド時

リフト収納時

介護リフト後付可能シェルター「RAKUAN(楽安)」

TKBS-0815R



RAKUAN(楽安)※オプション天井板

施設設置例

介護等でリフトが必要でない方には、もしもの災害等にも安全を約束する介護リフト後付可能シェルター「RAKUAN(楽安)」をお勧めします。介護リフトは将来の必要時に簡単に取り付けられます。

天井走行リフト対応シェルター「KAIHO(快保)」

TKBS-0815K



ベッド(含まれません)

KAIHO(快保)※天井走行リフト(含まれません)

既に天井走行用リフトがお部屋に設置されている方には、既存の介護リフトがそのまま使える天井走行リフトがそのまま使える天井走行リフト対応シェルター「KAIHO(快保)」をご用意しました。

お年寄りや足腰の弱い方も安心してゆっくり楽しく入浴できます。

■ 入浴踏み台

♥ T-101・T-111・T-112シリーズ

シャワーチェア・入浴踏台・イス等、様々な使い方ができ、ステンレス製のため錆びにくく衛生的です。



座部穴あきタイプ
座部穴なしタイプ

素材 脚部/ステンレスSUS-304 座部/ウレタンマット

サイズ
幅(L) 35cm (T-101S・T-101SK・T-111S・T-111SK)
幅(L) 45cm (T-101L・T-101LK・T-111L・T-111LK)
高さ(H) 15・20・25・30 (cm)
重量
Sタイプ 1.8Kg Lタイプ 2Kg (高さ20cmの場合)
※用途に応じて大きさと高さをお選びください



オールステンレス製なので、丈夫で錆びにくく大変衛生的です。

■ 跳ね上げてすり「ウイング」

♣ TF-401


使用しない時は90度跳ね上がるので移動に便利。



↑収納時

使用時↓

素材 ステンレスSUS-304
サイズ パイプ直径 2.5 cm
重量 2kg
付属品 SUSオールアンカー4本

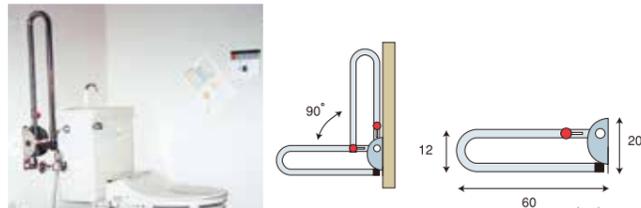

施工例 (トイレに設置)

♥ 介護保険購入対象製品 ♣ 介護保険住宅改修対象製品 対象商品の中でも自治体によっては対象外とされる場合がございます。詳しくは最寄りの市区町村にお問い合わせ下さい。

30年の信頼と実績で皆様をサポートします!



ヘルスケア部

ヘルスケア部では、主に介護保険レンタル、販売、住宅改修工事を行っております。その他、介護保険適応商品以外の福祉用具の販売や、身体障がい者の方の給付手続きを行っております。経験豊かな福祉用具専門相談員が対応させていただきます。福祉用具の相談は是非トマトへお任せください。



ケアサポート部

ケアサポート部では各メーカーの天井走行リフト、階段昇降機、段差解消機などの大型移動福祉機器を取扱しております。介護リフトを中心として「移動」「移乗」をサポートし、ご利用者様の生活環境のトータルサポートを行っております。「持ち上げない移乗」が生活の可能性をもっともっと広げます。



生産技術部

生産技術部では主に弊社の開発製品である「入浴用分離ストレッチャー」、「介護リフト付シェルター」などの福祉機器や「洗えるユニット畳」、「介護浴槽」、「安全手すり」などの介護向け製品の製作と自動車、電機、化学などのメーカー向けの物流機器や周辺設備などの製作及び設置取付工事を行っております。



開発設計から製造・メンテナンスまで社内で行う事でのトータルコーディネートを実現



お客様個別の特注製品にも対応いたします。お気軽にご相談ください。



株式会社トマト 本社

〒424-0053 静岡県静岡市清水区渋川1丁目6-20
事務所・製造工場 TEL:054-349-2180 FAX:054-349-2182
ヘルスケア事業部 TEL:054-349-2187 FAX:054-349-2182
ケアサポート事業部 TEL:054-349-2183 FAX:054-349-2182
沼津事務所 TEL:0120-0-41605 FAX:0120-05-8107

シルバーショップ雅

〒424-0053 静岡県静岡市清水区渋川1丁目6-20
介護ショップ TEL:054-349-4165 FAX:054-349-2182

